

⚠ 内蔵の充電電池に関する注意事項

●充電電池は消耗品です。(保証対象外) ●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は約 200 回が目安) ●電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。●長期間使用しないときは、本製品を満充電してから保管します。また1カ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくとう充電ができなくなることがあります。●電池の残量、充電環境および使用環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。●初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返し、正常に戻してください。●電池の容量が少ないと誤作動(作動時間が極端に短い・15分経っても止まらない・電圧が安定しないなど)や反応しない・動作しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は充電してください。

⚠ 製品に関する注意事項

⚠ 下記の方は絶対に使用しないでください。

●ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器を使用されている方。●人工心肺などの生命維持用医療用電子機器を使用されている方。●心電計などの装着型の医療用電子機器を使用されている方。●心臓に障害または弱い方。●病中・病後・療養中の方。●貧血ぎみの方。●乳幼児や子ども。●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方。●顔面の神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方。●貴金属にアレルギー反応が出たことがある方。●肌に傷や湿疹、はれものなど皮膚に異常がある方。●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方。●悪性腫瘍のある方。●脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)。●糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。●発熱(38℃以上)している方 または 体に異常を感じている方。●安静を必要とする方、四肢の不自由な方。●骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方。●体調不良、身体に異常を感じている方。●骨折、整形などで顔面や首、頸椎に埋め込み手術を受けた方。●乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方。●首や頸椎の病気のある方、またはあった方。●むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性(疼痛性)疾患のある。●医師からマッサージを禁じられている方。●医療機関で治療中の方(医師にご相談の上で使用ください)。●薬を服用中の方(医師にご相談の上で使用ください)。●首や頸椎の手術を行った方(医師にご相談の上で使用ください)。●生理中、妊娠中、出産直後の方(医師にご相談の上で使用ください)。●万一使用中に気分が悪くなった時は、すぐに使用を中止してください。●頭部及び目の周りや心臓の近く、皮膚疾患の場所には使用しないでください。

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●高温になる場所・湿気の多い場所・直射日光の当たる場所での保管・放置はしないでください。●落とす・ぶつけるなど本体に強い衝撃を与えないでください。●本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。●浴室などの水場では使用しないでください。●濡れた手で扱わないでください。●お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は使用しないでください。●分解・改造しないでください。故障や感電事故の原因となります。●子供など取り扱いに慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●一度に振動レベルを上げないでください。加減しながら調節してください。●睡眠時や運転中は使用しないでください。●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。●子供の手の届く場所に保管しないでください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様			
サイズ	約W14×D5×H14cm	重量/主材質	約200g/ABS・シリコン
電源	USB充電式 DC5V	内蔵電池	リチウム電池 3.7V 1200mAh
充電可能回数	約200回※市販の充電電池・電池は使用不可	セット内容	本体、USBケーブル、取扱説明書、保証書

※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
 【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00

取扱説明書


HAC2796A

BODY CARE GUN
ボディケアガン ゴルディオロックス

Goldilocks

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称

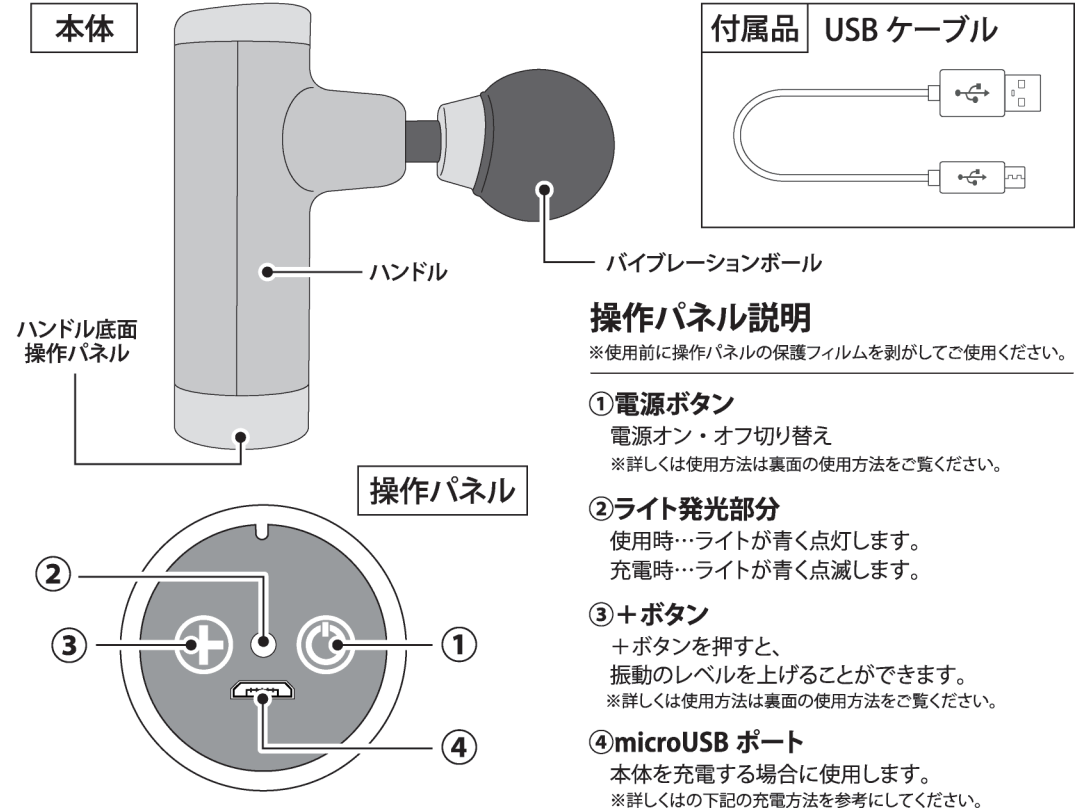


操作パネル説明

※使用前に操作パネルの保護フィルムを剥がしてご使用ください。

- ①電源ボタン**
電源オン・オフ切り替え
※詳しくは使用方法は裏面の使用方法をご覧ください。
- ②ライト発光部分**
使用時…ライトが青く点灯します。
充電時…ライトが青く点滅します。
- ③+ボタン**
+ボタンを押すと、振動のレベルを上げることができます。
※詳しくは使用方法は裏面の使用方法をご覧ください。
- ④microUSBポート**
本体を充電する場合に使用します。
※詳しくは下記の充電方法を参考にしてください。

充電方法

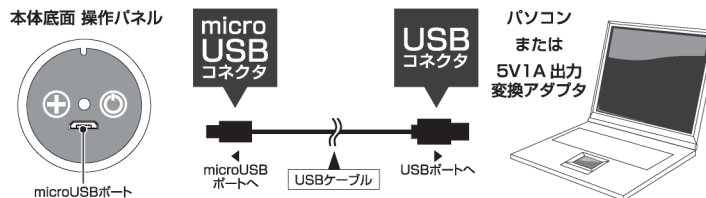

- ①付属のUSBケーブルで本製品のmicroUSBポートとパソコンのUSBコネクタを接続します。
- ②ランプが青く点滅し、充電を開始します。
- ③充電が完了するとランプは点滅から点灯に変わります。

※充電完了後はUSBケーブルを取り外してください。USBケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

※製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。

充電時間

約7時間

※使用状況により異なる

動作時間

約15分

※自動で電源がオフになります

使用方法 ※ご使用前に「製品を使用する前に」・「商品に関する注意事項」を必ずお読みください

1. 電源をオン (使用開始)

電源ボタンを押すと、ランプが青く点灯し、振動レベル1から開始します。※電源ボタンはしっかりと押してください。押す力加減によっては反応しない場合があります。

2. ハンドル部分をしっかりと手で持ち ほぐしたい部分にバイブレーションボールを 肌に軽く当てて使用してください

※1回の使用時間は10分以内を目安としてください。また、同一箇所への連続使用は3分以内を目安としてください。※ご使用前に「商品を使用する前に」「商品に関する注意事項」を必ずお読みの方え、正しくご使用ください。

⚠️ 下記の部位には使用不可

本製品は腹部や胸部、
頭部、首、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には
絶対に使用しないでください。

3. 振動レベル調整

振動レベルは、5段階(レベル1~5)から選べます。電源オン時は振動レベルが最小の1でスタートします。レベルを上げる場合は、+ボタンを押して、振動レベルを上げてください。+ボタンを押すたびに、振動レベルが1レベルずつ上がります。振動レベルが最高の5の状態>+ボタンを押すと振動レベルが最小の1の状態に戻ります。






4. 電源をオフ (使用停止)

使用中に振動を停止するには、電源ボタンを約2秒間押してください。※電源ボタンはしっかりと押してください。押す力加減によっては反応しない場合があります。※電源ボタンを押さない場合は自動で15分後に停止します。

本製品は15分後に自動で電源がオフになります。

振動レベル	1分あたりの回転数
1	約2000回
2	約3000回
3	約5000回
4	約7000回
5	約9000回

※使用状況により異なります。

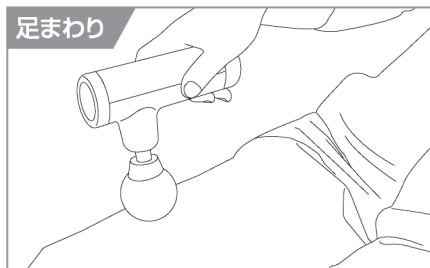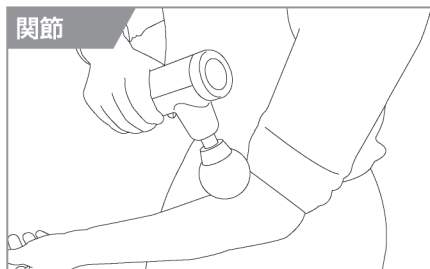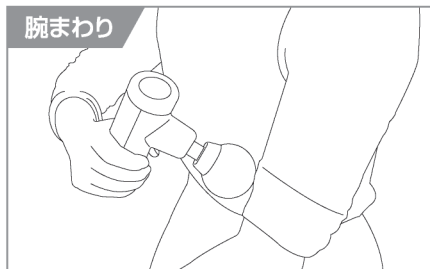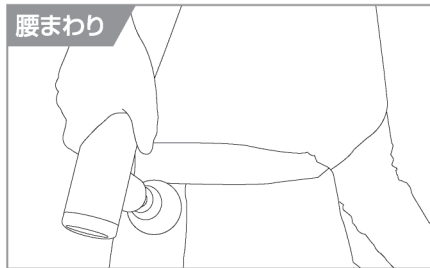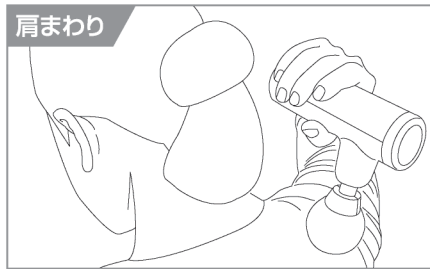

製品を使用する前に

●はじめは短い時間で使用してください。

強い刺激に慣れていないと、けがや体調不良の原因になります。振動の影響には個人差があるので、ご使用の際は注意してください。

●1回の使用目安は10分以内を目安にし、同一箇所への連続使用は3分以内を目安にしてください。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間は1時間以内にしてください。最低30分以上は機器を停止させてから、再度ご使用ください。本体が熱くなって、故障の原因になります。

●本体は必ず手に持って使用する。本体の上のったり、座ったりして使用しないでください。

転倒による事故やけが、故障の原因になります。

●腹部や胸部、頭部、首、ひじ、ひざ、背骨などの骨部には絶対に使用しないでください。

上記の部位には対応しておりません。事故やけが、体調不良の原因になります。

●強く押しつけて使用しないでください。

皮膚や筋肉を傷める原因になります。また肌の弱い方は素肌で使用しないでください。

●本製品を使用するときは、アクセサリー類を外してください。

皮膚や筋肉を傷める原因になります。

●次のようなときは使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。

1. 疲労が激しい時。2. 飲酒前、飲酒後。3. 食前、食後の1時間。4. 睡眠中。5. 皮膚に異常のある時。

●使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

●子供やペットに本製品で遊ばせたり、使用させないでください。

事故やけが、体調不良の原因になります。

●使用時または充電中に異臭・異常発熱したときは使用を中止してください。

破損・発火の原因になります。

⚠️ お手入れ方法

●本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。●ご使用後は毎回、水に浸した布を硬くしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、硬くしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。●アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

⚠️ 保管方法

●使用しないときは、本製品の電源をオフにし、USBケーブルをパソコン等から抜いて保管してください。●長期間使用しないときは、本製品を満充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。●色移りしやすい濃色系の収納袋等に入れて保管しないでください。色が本製品に色移りする恐れがあります。●長期間使用しないときは、本製品を火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。●子供の手の届かない場所に保管してください。