

充電式アイマスク

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠️ 下記の方は絶対に使用しないでください。

●ペースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器を使用されている方。●人工心臓などの生命維持管理装置を使用されている方。●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。●体温38℃以上の有熱期にある方。(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)●背骨に異常または曲がっている方。●骨粗しょう症の方、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の方。●心電計などの装着型の医療用電子機器を使用されている方。●悪性腫瘍のある方。●病中・病後・療養中の方。●心臓に障害または弱い方。●貧血ぎみの方。●生理中または妊娠されている方。●皮膚感覚障害または皮膚に異常のある方。●疲労時、酒気帯び時。●熱がある場合など、体に異常を感じている方。●本製品を使用しても効果が見られない方。●それ以外の場合でも、万一使用中に気分が悪くなった時は、すぐに使用を中止してください。※血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など症状を悪化させるおそれがあります。

商品取り扱いに関する注意事項

●本製品を長時間同じ場所に当て続けると低温やけどになる可能性があります。使用の際には十分にご注意ください。
●目や目のまわりに湿疹、かぶれなどが現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。●ジェルパッドを使用する場合は、温熱機能を使用しないでください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく縫製のほつれが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。●本製品は充電しながら使用はできません。●低温やけどを起こす程、長時間使用しないでください。●本製品を装着中、立ち歩いたり他の作業はしないでください。●本製品の上から目を押さえないでください。●本製品を使用したままの状態では睡眠を取ることは絶対しないでください。●本製品にピンや針を刺す・踏みつける・叩くなどの強い衝撃を与えないでください。●本製品を折り畳んで使用しないでください。●暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●メイクをされたまま使用されると、メイクが落ちたり、本製品に色移りする場合があります。●ご使用後すぐに目を開けず、1分過ぎてから目を開けてください。●直射日光に長時間当たると色あせる場合があります。●摩擦などで色移りする場合があります。●使用中、肌に刺激を感じたり、かゆみ・不快感などを感じられた場合は直ちに使用を止めてください。●ご使用後、目や目のまわりが温まると、一時的に目や目のまわりが赤くなる場合がありますが、時間が経つと薄くなりますので、問題ではありません。症状が回復しない場合は医師に相談してください。●本製品の分解・改造は使用しないでください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●使用後は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

低温やけどについて

低温やけどは、心地よく感じる程度(体温より少し暖かい温度)のものでも、皮膚の同じ部分が長い時間接触していると発生するやけどです。42度を越える「暖かい」と感じる程度の温度でも長時間の接触で低温やけどになってしまいます。44度なら6時間～の接触で受傷します。温度が高くなれば、それより短い時間でもやけどしてしまいます。低温やけどは皮膚の深いところまで達することがありますので万が一、低温やけど(皮膚の変色や痛み)が起きた時には、すぐに専門医の診断を受けてください。

※周囲の方が注意を要する使用者

乳幼児、お年寄り、ご病人、皮膚の弱い方、身体に障害をお持ちの方、疲労の激しい方、お酒に酔われた方、睡眠薬や風邪薬など眠気を誘う薬を服用された方など

《低温やけどを防ぐために》

●熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。●コタツや電気カーペットその他の暖房器具との併用は避けてください。●小さなお子様やお年寄りの方、身体の不自由な方は同じ部分に長時間あて続けられないように本体の位置を変えながら使用してください。●長時間熱源を押し付けられないようにしてください。

【製品仕様】


内蔵電池	3.7V リチウムイオン電池 900mAh
電源	USB充電式(入力:DC5V1A)
消費電力	最大約5W
充電時間	約2.5時間
充電可能回数	約300回
連続使用時間	低(20分×6回)、中(20分×5回)、高(20分×4回)
表面温度	約30℃(低)/約35℃(中)/約40℃(高)
本体サイズ	約W22.5×D2.5×H10cm(ベルト含まず)
重量	約60g(本体)、約60g(ジェルパッド)
主材料	PU・綿・PE・ポリエステル・PVC・PP

※連続使用時間・温度はあくまでも目安です。使用状況により異なります。※イラストはイメージです。実際商品と多少異なる場合があります。※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。

各部名称/使用方法

本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

本製品はタイマー設定が内蔵されており、電源がONになってから約20分間経過すると、自動で電源がOFFになります。

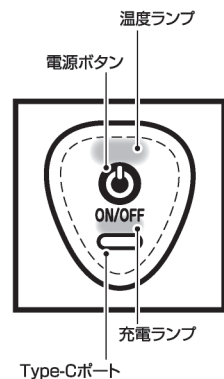

① 本体を装着してください。

本体を目元の位置に合わせて、アジャスターの位置で長さ調整しながら、本体を固定して装着します。

② 電源をONにしてください。

電源ON→電源ボタン長押し
電源OFF→電源ボタンを再度長押し

③ 加熱温度を調整してください。

電源が入った状態で電源ボタンを短押しすることにより、加熱温度が切り替わります。




ジェルパッドの使用方法

本体にジェルパッドを装着して冷感アイマスクとして使用できます。

※ジェルパッドで冷感アイマスクとして使用している際は、温熱機能と併用しないでください。

- ① 付属のジェルパッドを冷蔵庫で冷やします。
- ② ジェルパッドを本体の内側ポケットに入れ、装着します。

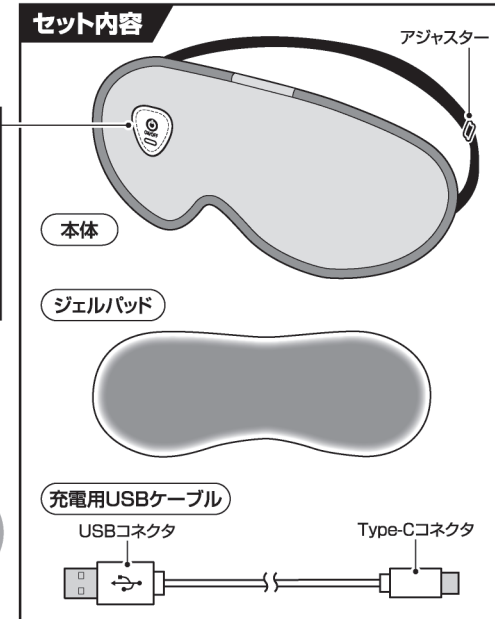


充電方法

付属の充電用USBケーブルで、右図を参考に本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電が開始されるとランプが赤色点灯し、緑色点灯になると充電完了です。

充電時間:約2.5時間 ※使用環境により異なります。

※充電しながらのご使用はおやめください。

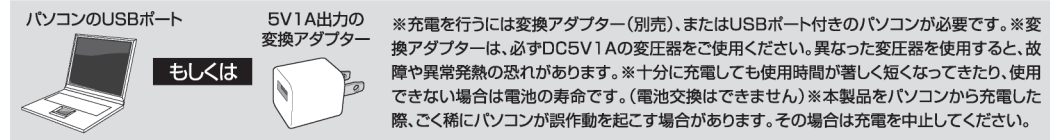

注意

接続機器のデータ および プログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

発売元：株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～16:00